



Supplying Hospitals  
for Over 90 Years

**REF MDS80316**

## **Raised Toilet Seat** **Asiento de Inodoro Elevado**

**Product is not made with Natural Rubber Latex.**  
**El producto no está hecho con caucho de látex natural.**

Please read all instructions carefully before use.  
Lea con cuidado todas las instrucciones antes de usar.

## User Instructions

Safety Summary: The following recommendations are made for the safe assembly of the raised toilet seat.

### WARNINGS:


- ⚠ **DO NOT** assemble or use this equipment without first reading and understanding this instruction sheet. If you are unable to understand the Warnings, Cautions or Instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to install this equipment. Otherwise, injury or damage may occur.
- ✓ Certain toilet fixtures will prevent the locking raised toilet seat from working properly and/or will damage the locking raised toilet seat. If the toilet bowl has on its top or inner ring any raised or protruding points or sections, the locking raised toilet seat should not be used.
- ✓ **BEFORE** each use, ensure that **ALL** attaching hardware is securely tightened.
- ✓ Use the arm supports **ONLY** for assistance. **DO NOT** attempt to use the arms to support full body weight.
- ✓ Always check to make sure that the raised toilet seat is properly and securely locked in place before using. Make certain that the knob that secures the raised toilet seat to the commode is tight at all times.
- ✓ Center your weight on the raised toilet seat. The seat may tip if you lean too far forward to either side, or if equipped by leaning on only one armrest. Evenly distribute weight between the armrests during use.
- ✓ The raised toilet seat's weight capacity is: 350 lbs. (159 kg.)
- ⚠ Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted when using the raised toilet seat.
- ✓ Rotate the adjustment knob by hand only to prevent over-torque of the assembly. Use of a wrench or other tool will break the screw assembly. **DO NOT FORCE** knob as this may damage the knob and/or the raised toilet seat.
- ✓ The Medline raised toilet seat is not designed for permanent installation. The unit should be loosened and retightened at least once a week to ensure a proper fit.
- ⚠ If, for any reason, a proper fit in installation cannot be achieved, **DO NOT** use and contact retailer where purchased for return instructions.

### To Install the Equipment to the Toilet Bowl

The Medline raised toilet seat has been designed to accommodate a wide variety of toilet bowl types. However, certain bowl types will require the removal of the existing seat and/or lid to ensure proper fit when installed.

1. Lift the seat and lid of the toilet.
2. Rotate adjustment knob of the raised toilet seat counter clockwise until the paddle is far enough back to clear the inner rim of the bowl.
3. Place the raised toilet seat onto the bowl rim hooking the rear wings under edge of bowl. Check that the unit rests flat on the bowl rim. The knob must be at the front end of the toilet bowl.
4. Center the unit on the bowl rim and push the back as far as possible with your hands.
5. Rotate adjustment knob clockwise to tighten. Turn until resistance is felt, then turn an additional 1/8" until snug.

Rear Seat Wings

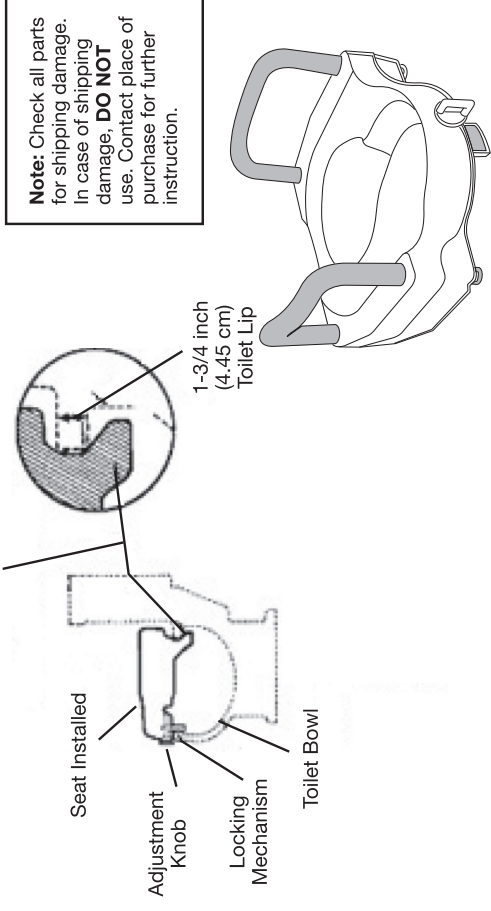

### To Use Toilet with this Equipment

1. Carefully back up to the raised toilet seat until you feel the back of your knees touching it.
2. Reach back for both armrests to guide you into position.
3. Slowly lower yourself onto the raised toilet seat while bending your elbows and knees.
4. Carefully use the armrests for assistance.
5. Slowly raise yourself off of the toilet seat.
6. Ensure that you have your balance before releasing your grasp from the raised toilet seat.

### To Remove the Equipment from the Toilet Bowl

1. Rotate the knob counterclockwise until seat is loose.
2. Lift up the front of the raised toilet seat until the adjustment bracket clears the lip of the toilet bowl.
3. To completely remove the seat from the toilet bowl, pull the seat towards you at an angle.

### To Clean the Equipment

This raised toilet seat can be easily cleaned with regular household cleaning products. "DO NOT" use abrasive powders or scouring pads.

1. Clean the seat at least once a week, using a non-abrasive detergent or non-abrasive cleaner with warm water.
2. Rinse with warm water and wipe with a non-abrasive cloth.

## Instrucciones de Usuario

Resumen de Seguridad: Se hacen las siguientes recomendaciones para el armado seguro del asiento de inodoro elevado.

### ADVERTENCIAS:


- ⚠ **NO** arme o use este equipo sin primero leer y entender esta hoja de instrucciones. Si no puede entender las advertencias, precauciones o instrucciones, contacte a un profesional de salud, vendedor o personal técnico antes de intentar instalar este equipo. De otra manera, pueden ocurrir lesiones o daños.
- ✓ Ciertos aditamentos de inodoro evitarán que el asiento de inodoro elevado bloqueante funcione apropiadamente y/o lo dañarán. Si la taza de inodoro tiene en su aro superior o interior algún punto o sección elevado o saliente, el asiento de inodoro elevado bloqueante no debe ser usado.
- ✓ **ANTES** de su uso, asegúrese de que **TODO** el equipo de acople esté ajustado firmemente.
- ✓ Use los soportes de brazo **ÚNICAMENTE** para asistencia. **NO** intente usar los brazos para soportar todo el peso del cuerpo.
- ✓ Siempre revise para asegurarse que el asiento de inodoro elevado esté bloqueado apropiada y firmemente en su sitio antes de usarlo. Asegúrese que la perilla que asegura el asiento de inodoro elevado al cómodo esté ajustada en todo momento.
- ✓ Centre su peso sobre el asiento de inodoro elevado. El asiento puede volcarse si se inclina demasiado hacia adelante o a un lado, o si se equipa apoyándose sólo en un apoyabrazos. Répartir uniformément le poids entre les accoudoirs au cours de l'utilisation.
- ✓ La capacidad de peso del asiento de inodoro elevado es: 350 lbs. (159 kg.)
- ⚠ Usuarios con capacidades físicas limitadas deben ser supervisados o asistidos al usar el asiento de inodoro elevado
- ✓ Rote manualmente la perilla de ajuste para evitar sobreajustar el conjunto. El uso de una llave u otra herramienta romperá el conjunto de tornillo. **NO** fuerce la perilla, pues esto puede dañar la perilla y/o el asiento de inodoro elevado.
- ✓ El asiento de inodoro elevado Medline no está diseñado para instalación permanente. La unidad debe ser aflojada y reajustada al menos una vez por semana para asegurar un ajuste apropiado.
- ✓ Si por alguna razón no puede obtenerse un ajuste apropiado en la instalación, **NO** utilice y contacte al vendedor donde lo compró para instrucciones de devolución.

## Para instalar el equipo a la taza de inodoro

El asiento de inodoro elevado Medline ha sido diseñado para acomodar una amplia variedad de tipos de taza de inodoro. Sin embargo, ciertos tipos de taza requerirán el retiro del asiento y/o tapa existente para asegurar un encaje apropiado cuando se instale.

1. Levante el asiento y tapa del inodoro.
2. Rote la perilla de ajuste del asiento de inodoro elevado en sentido antihorario hasta que la paleta esté lo bastante hacia atrás para no tocar el anillo interior de la taza.
3. Coloque el asiento de inodoro elevado en el anillo de la taza enganchando las aletas traseras bajo el borde de la taza. Compruebe que la unidad esté plana sobre el aro de la taza. La perilla debe estar en la parte frontal de la taza de inodoro.
4. Centre la unidad en el aro de la taza y empuje hacia atrás tanto como sea posible con sus manos.
5. Rote la perilla de ajuste en sentido horario para ajustar. Gire hasta que sienta resistencia, luego gire 0.3175 cm adicional hasta que esté firme.

## Alteras de Asiento Trasero

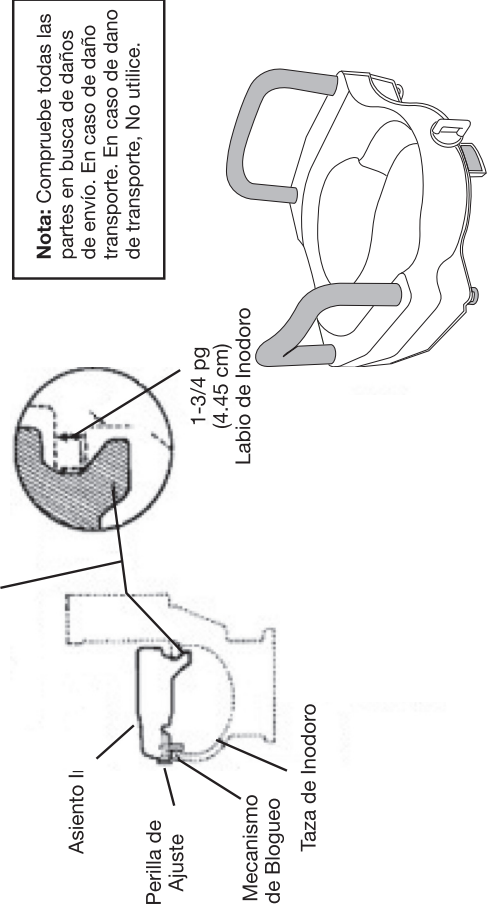

## Para Usar el Ir

1. Retroceda con cuidado al asiento de inodoro elevado hasta que sienta la parte posterior de sus rodillas tocándolo.
2. Retroceda con cuidado hasta el asiento de inodoro elevado hasta que sienta la parte posterior de sus rodillas tocándolo.
3. Doble sus codos y rodillas y sosténgase en ambos apoyabrazos mientras se baja lentamente sobre el asiento de inodoro elevado.
4. Utilice con cuidado los apoyabrazos para ayudarse.
5. Levántese lentamente del asiento.
6. Teniendo cuidado en distribuir uniformemente la presión en ambos apoyabrazos.

## Para Retirar el Equipo de la Taza de Inodoro

1. Rote la perilla en sentido antihorario hasta que el asiento esté suelto.
2. Eleve el frente del asiento de inodoro elevado hasta que el soporte de ajuste salga del labio de la taza de inodoro.
3. Para retirar completamente el asiento de la taza de inodoro, tire del asiento hacia usted en ángulo.

## Para Limpiar el Equipo

Este asiento de inodoro elevado puede ser fácilmente limpiado con productos de limpieza doméstica regulares. NO utilice polvos o alimohadillas abrasivos.

1. Limpie el asiento al menos una vez por semana, usando un detergente o limpiador no abrasivo con agua tibia.
2. Enjuague con agua tibia y limpie con un paño no abrasivo.

LIMITED WARRANTY

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect not covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, which are subject to normal wear and replacement.

GARANTÍA LIMITADA

Su producto Medline está garantizado libre de defectos en materiales y mano de obra durante su tiempo de uso por el comprador original. Este dispositivo fue construido con estándares precisos e inspeccionado cuidadosamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y mano de obra de nuestros productos, y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de un defecto no cubierto por esta garantía, a nuestra elección, repararemos o reemplazaremos el dispositivo. Esta garantía no cubre fallos debidos a mal uso o negligencia por el propietario, o al desgaste y deterioro normales. Esta garantía no se extiende a componentes no duraderos, tales como accesorios de goma que estén sujetos a desgaste y reemplazo normales.



Medline Industries, Inc.  
One Medline Place  
Mundelein, IL 60060

Medline United States  
1-800-MEDLINE (633-5463)  
www.medline.com | info@medline.com

Medline Canada  
1-800-396-6996  
www.medline.ca | canada@medline.com

Medline México  
01-800-831-0898  
www.medlinemexico.com | mexico@medline.com

Medline is a registered trademark of Medline Industries, Inc.  
Medline es una marca registrada de Medline Industries, Inc.

© 2014 Medline Industries, Inc.

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada.  
Please contact your Account Representative for additional information.  
We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual.  
Algunos productos pueden no estar disponibles para su venta en México o Canadá.  
Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional.  
Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual.

